

PRODUCT INFORMATION & MANUAL

Human sL-selectin Instant ELISA

Enzyme-linked Immunosorbent Assay for
quantitative detection of human sL-selectin.



*For in-vitro diagnostic
use. Not for therapeutic
procedures.*

REF *BMS206INSTCE*

Σ *128 TESTS*



*Human sL-selectin
Instant ELISA
CE-IVD*

North America

Technical Support:

Research Products:
888.810.6168
858.642.2058
tech@eBioscience.com

Clinical Products:
877.726.8559
858.642.2058
tech@eBioscience.com

Customer Service:

888.999.1371
858.642.2058
info@eBioscience.com

Fax:

858.642.2046

Europe/International*

Technical Support:

+43 1 796 40 40-120
tech@eBioscience.com

Customer Service:

+43 1 796 40 40-304
europe@eBioscience.com

Fax:

+43 1 796 40 40-400



Bender MedSystems GmbH
Campus Vienna Biocenter 2
1030 Vienna, Austria
www.eBioscience.com

* Customers outside North America and Europe
may contact their eBioscience distributor listed on
our website at www.eBioscience.com/distributors.

TABLE OF CONTENTS

1	Intended Use	4
2	Summary	4
3	Principles of the Test	7
4	Reagents Provided	8
5	Storage Instructions	9
6	Specimen Collection	9
7	Materials Required But Not Provided	10
8	Precautions for Use	11
9	Preparation of Reagents and Samples	13
10	Test Protocol	14
11	Calculation of Results	18
12	Limitations	22
13	Performance Characteristics	23
14	Ordering Information	27
15	Reagent Preparation Summary	28
16	Test Protocol Summary	29
PRODUKTINFORMATION UND HANDBUCH (Deutsch)		30
1	Mitgelieferte Reagenzien	30
2	Lagerhinweise	31
3	Sicherheitsvorkehrungen für den Gebrauch	32
4	Vorbereitung der Reagenzien	34
5	Testprotokoll	35
INFORMACIÓN Y MANUAL DEL PRODUCTO (Español)		38
1	Reactivos Suministrados	38
2	Instrucciones de Conservación	39
3	Precauciones de uso	40
4	Preparación de los Reactivos	42
5	Protocolo de Ensayo	43
INFORMATIONS SUR LE PRODUIT ET MANUEL (Français)		46
1	Réactifs Fournis	46
2	Instruction de Stockage	47

3	Preventions de Sécurité pour l'Usage	48
4	Préparation des Réactifs	50
5	Protocole de Test	51
	INFORMAZIONI SUL PRODOTTO E MANUALE (italiano)	55
1	Reagenti Forniti	55
2	Istruzioni di Conservazione	56
3	Precauzioni per l'Uso	57
4	Preparazione Dei Reagenti	59
5	Procedura del Test	60

1 Intended Use

The human sL-selectin Instant ELISA is an enzyme-linked immunosorbent assay for the quantitative detection of soluble L-selectin (Leukocyte-Endothelial Cell Adhesion molecule-1) levels in cell culture supernatants, human serum, plasma, amniotic fluid, or other body fluids. The human sL-selectin Instant ELISA is **for in vitro diagnostic use. Not for use in therapeutic procedures.**

2 Summary

Leukocyte-Endothelial Cell Adhesion Molecule-1, L-selectin (LECAM-1, MEL-14, LAM-1, LEU-8, TQ1, LEC.CAM-1, DREG.56) belongs to the selectin family of adhesion molecules. Together with ELAM-1 (E-selectin) and GMP-140 (P-selectin) L-selectin mediates the initial interactions of leukocytes with endothelial cells.

Molecular structure: The extracellular part of all selectins consists of an aminoterminal c-type lectin domain which specifically binds to carbohydrate ligands. This is followed by an EGF-like domain, and in the case of L-selectin, by 2 short consensus repeats similar to the short consensus units in complement regulatory proteins. The transmembrane portion of the molecule is followed by a short cytoplasmic tail.

Selectins guide non-activated polymorphonuclear cells to the areas of inflammation in creating first, loose contacts with the endothelial layer. L-selectin in this aspect mediates rolling of PMN's on endothelial cells. The potential binding partners of L-selectin carry a negative charge, probably a sialic acid and/or sulphate, and may contain mannose and fucose. In addition, L-selectin may also interact with ELAM-1 which is expressed on cytokine-activated endothelial cells. L-selectin is constitutively expressed on most leukocytes (PMN's, monocytes, lymphocyte subsets) in a seemingly functional form. It is required for the binding of lymphocytes to the high endothelial venules of peripheral lymph nodes (and therefore serves as a lymphocyte recirculating receptor) and for the invasion of neutrophils into sites of inflammation. When neutrophils are activated, L-selectin is shed by proteolytic cleavage near the transmembrane span. Lymphocytes and monocytes can also shed L-selectin upon activation although the kinetics are significantly lower. A broad range of activating agents including C5a,

fMLP, TNF, GM-CSF, IL-8 are effective in inducing this response. The shed form of L-selectin (sL-selectin) is functionally active and at high concentrations can inhibit leukocyte attachment to endothelium. The main source for sL-selectin in serum seems to be tissue localized leukocytes.

Determination of soluble/circulating L-selectin could provide more detailed insights into the pathological modifications during various diseases:

- allergy: L-selectin expression is down-modulated on eosinophils recovered from bronchoalveolar lavage fluid after allergen provocation.
- bronchoalveolar lavage (BAL): BAL transiently promotes PMN/monocyte activation and recruitment to the bronchoalveolar space. The cells respond with a complete shedding of L-selectin when they extravasate from the blood into the bronchoalveolar space.
- deep venous thrombosis (DVT): A case can be made for the participation of PMN's in the initiation and propagation of venous thrombosis. Probably via L-selectin leukocytes adhere to areas of veins that serve as sites for initiation of thrombi.
- HIV: patients suffering from HIV-infection showed markedly elevated levels of sL-selectin in serum.
- insulin-dependent diabetes mellitus (IDDM): serum levels of L-selectin were found to be elevated in IDDM patients and in subjects at risk for developing IDDM.
- Kawasaki Syndrome: sL-selectin levels seem to be less than those of normals.
- malignant B-cell populations: B-cell chronic lymphocytic leukaemia, hairy cell leukaemia and mantle zone lymphoma are L-selectin positive.
- neonatal bacterial infection: in case of intra-uterine infection lymphocytes obtained from cord blood have a diminished L-selectin expression. This is independent of gestational age, birth weight, umbilical artery pH, hematocrit, leukocyte count, absolute neutrophil count, CRP-level or maternal fever.

- sepsis: patients suffering from sepsis showed markedly elevated levels of sL-selectin in serum. Vascular endothelial injury observed in overwhelming sepsis may be caused by neutrophil-derived enzymes. Adherence to endothelium is a prerequisite for this process. Measurement of sL-selectin may provide further insights into the interrelationship between neutrophil activation and endothelial damage in gram-negative sepsis.

- surgery: patients undergoing cardiopulmonary bypass surgery may develop an acute post-operative capillary leak, due to endothelial injury inflicted by adherent neutrophils. In those patients L-selectin is completely lost in a small but progressively increasing proportion of PMN's, which could be responsible for the endothelial damage.

For literature update refer to **www.eBioscience.com**

3 Principles of the Test

An anti-human sL-selectin monoclonal coating antibody is adsorbed onto microwells. Human sL-selectin present in the sample or standard binds to antibodies adsorbed to the microwells; an HRP-conjugated monoclonal anti-human sL-selectin antibody binds to human sL-selectin captured by the first antibody.

Following incubation unbound enzyme conjugated anti-human sL-selectin is removed during a wash step and substrate solution reactive with HRP is added to the wells.

A coloured product is formed in proportion to the amount of human sL-selectin present in the sample. The reaction is terminated by addition of acid and absorbance is measured at 450 nm. A standard curve is prepared from seven human sL-selectin standard dilutions and human sL-selectin sample concentration determined.

Figure 1

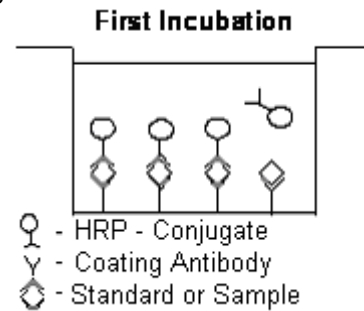


Figure 2


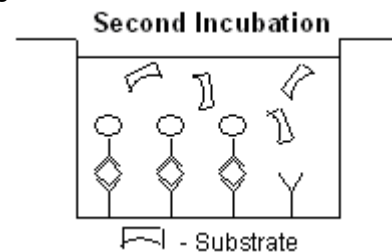


Figure 3

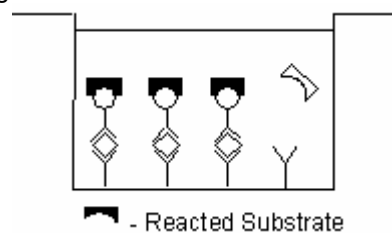

4 Reagents Provided

- 1 aluminium pouch with a **Microwell Plate coated with Monoclonal Antibody** (murine) to human sL-selectin, **Sample Diluent** and **HRP-Conjugate** (anti-sL-selectin monoclonal (murine) antibody), lyophilized
- 2 aluminium pouches with a **human sL-selectin Standard curve (coloured)**
- 1 bottle (25 ml) **Wash Buffer Concentrate 20x** (phosphate-buffered saline with 1% Tween 20)
- 1 vial (15 ml) **Substrate Solution** (tetramethyl-benzidine)
- 1 vial (50 ml) **Sample Diluent**
- 1 vial (15 ml) **Stop Solution** (1M Phosphoric acid)
- 2 adhesive **Plate Covers**

5 Storage Instructions

Store ELISA plate and Standard curves or whole kit at -20°C. The plate and the standard curves can also be removed, stored at -20°C, remaining kit reagents can be stored between 2° and 8°C. Expiry of the kit and reagents is stated on labels.

The expiry of the kit components can only be guaranteed if the components are stored properly, and if, in case of repeated use of one component, the reagent is not contaminated by the first handling.

6 Specimen Collection

Cell culture supernatants, human serum, plasma and amniotic fluid were tested with this assay. Other biological samples might be suitable for use in the assay. Remove the serum or plasma from the clot or red cells as soon as possible after clotting and separation.

Pay attention to a possible “**Hook Effect**” due to high sample concentrations (see chapter 11).

Samples containing a visible precipitate must be clarified prior to use in the assay. Do not use grossly hemolyzed or lipemic specimens.

Samples must be stored frozen at -20°C to avoid loss of bioactive human sL-selectin. If samples are to be run within 24 hours, they may be stored at 2° to 8°C (for sample stability refer to 13).

Avoid repeated freeze-thaw cycles. Prior to assay, frozen serum or plasma should be brought to room temperature slowly, mixed gently and diluted properly with Sample Diluent (1:100).

7 Materials Required But Not Provided

- 5 ml and 10 ml graduated pipettes
- 5 μ l to 1000 μ l adjustable single channel micropipettes with disposable tips
- 50 μ l to 300 μ l adjustable multichannel micropipette with disposable tips
- Multichannel micropipette reservoir
- Beakers, flasks, cylinders necessary for preparation of reagents
- Device for delivery of wash solution (multichannel wash bottle or automatic wash system)
- Microwell strip reader capable of reading at 450 nm (620 nm as optional reference wave length)
- Glass-distilled or deionized water
- Statistical calculator with program to perform linear regression analysis

8 Precautions for Use

- All chemicals should be considered as potentially hazardous. We therefore recommend that this product is handled only by those persons who have been trained in laboratory techniques and that it is used in accordance with the principles of good laboratory practice. Wear suitable protective clothing such as laboratory overalls, safety glasses and gloves. Care should be taken to avoid contact with skin or eyes. In the case of contact with skin or eyes wash immediately with water. See material safety data sheet(s) and/or safety statements(s) for specific advice.
- Reagents are intended for in vitro diagnostic use and are not for use in therapeutic procedures.
- Do not mix or substitute reagents with those from other lots or other sources.
- Do not use kit reagents beyond expiration date on label.
- Do not expose kit reagents to strong light during storage or incubation.
- Do not pipette by mouth.
- Do not eat or smoke in areas where kit reagents or samples are handled.
- Avoid contact of skin or mucous membranes with kit reagents or specimens.
- Rubber or disposable latex gloves should be worn while handling kit reagents or specimens.
- Avoid contact of substrate solution with oxidizing agents and metal.
- Avoid splashing or generation of aerosols.
- In order to avoid microbial contamination or cross-contamination of reagents or specimens which may invalidate the test use disposable pipette tips and/or pipettes.
- Use clean, dedicated reagent trays for dispensing substrate reagent.

- Glass-distilled water or deionized water must be used for reagent preparation.
- Substrate solution must be at room temperature prior to use.
- Decontaminate and dispose specimens and all potentially contaminated materials as they could contain infectious agents. The preferred method of decontamination is autoclaving for a minimum of 1 hour at 121.5°C.
- Liquid wastes not containing acid and neutralized waste may be mixed with sodium hypochlorite in volumes such that the final mixture contains 1.0% sodium hypochlorite. Allow 30 minutes for effective decontamination. Liquid waste containing acid must be neutralized prior to the addition of sodium hypochlorite.

9 Preparation of Reagents and Samples

Buffer concentrate should be brought to room temperature and diluted before starting the test procedure. If crystals have formed in the buffer concentrate, warm it gently until crystals have completely dissolved.

9.1 Wash Buffer (1x)

Pour entire contents (25 ml) of the Wash Buffer Concentrate (20x) into a clean 500 ml graduated cylinder. Bring to final volume to 500 ml with glass-distilled or deionized water. Mix gently to avoid foaming.

Transfer to a clean wash bottle and store at 2° to 25°C. Please note that Wash Buffer (1x) is stable for 30 days.

10 Test Protocol

- Use plate immediately after removal from -20°C!
 - Do not wait until pellets have completely dissolved before applying samples - the binding reaction in the standard strips starts immediately after addition of water!
 - Do not try to dissolve pellets by pipetting up and down in the wells - some parts of the pellet could stick to the tip creating high variation of results
 - Perform the washing step with at least 400 µl of washing buffer as stated in the manual or fill the wells completely - otherwise any pellet residues sticking to the rim of the well will not be removed and create high variation of results
 - Allow the washing buffer to sit in the wells for a few seconds before aspiration
 - Remove covers of the standard strips carefully in order that all the lyophilised pellets remain in the wells
- a. a. Dilute serum or plasma samples 1:100 with Sample Diluent according to one of the following dilution schemes:
- I. 5 µl Sample + 495 µl Sample Diluent or alternatively
 - II. 10 µl Sample + 90 µl Sample Diluent, take 50 µl of this 1:10 diluted Sample and add 450 µl Sample Diluent.
- b. Determine the number of Microwell Strips required to test the desired number of samples plus Microwell Strips for blanks and standards (coloured). Each sample, standard, blank, and optional control sample should be assayed in duplicate. Remove extra Microwell Strips from holder and store in foil bag with the desiccant provided at -20°C sealed tightly. Place microwell strips containing the standard curve in position A1/A2 to H1/H2 (see Table 1).
- c. Add **distilled water** to all **standard and blank wells** as indicated on the label of the standard strips (A1, A2 to H1, H2).
- d. Add 100 µl of **distilled water** to the **sample wells**.

Table 1

Table depicting an example of the arrangement of blanks, standards and samples in the microwell strips:

	1	2	3	4
A	Standard 1 (25.00 ng/ml)	Standard 1 (25.00 ng/ml)	Sample 1	Sample 1
B	Standard 2 (12.50 ng/ml)	Standard 2 (12.50 ng/ml)	Sample 2	Sample 2
C	Standard 3 (6.25 ng/ml)	Standard 3 (6.25 ng/ml)	Sample 3	Sample 3
D	Standard 4 (3.13 ng/ml)	Standard 4 (3.13 ng/ml)	Sample 4	Sample 4
E	Standard 5 (1.56 ng/ml)	Standard 5 (1.56 ng/ml)	Sample 5	Sample 5
F	Standard 6 (0.78 ng/ml)	Standard 6 (0.78 ng/ml)	Sample 6	Sample 6
G	Standard 7 (0.39 ng/ml)	Standard 7 (0.39 ng/ml)	Sample 7	Sample 7
H	Blank	Blank	Sample 8	Sample 8

- e. Add 50 µl of each 1:100 prediluted **Sample**, in duplicate, to the designated wells and mix the contents.
- f. Cover with a **Plate Cover** and incubate at room temperature (18°C to 25°C) for 2 hours, if available on a microplate shaker at 400 rpm.
- g. Remove **Plate Cover** and empty wells. Wash the microwell strips 3 times with approximately 400 µl Wash Buffer per well with thorough aspiration of microwell contents between washes. Take care not to scratch the surface of the microwells.

After the last wash, tap microwell strips on absorbent pad or paper towel to remove excess Wash Buffer. Use the microwell strips immediately after washing or place upside down on a wet absorbent paper for no longer than 15 minutes. Do not allow wells to dry.

- h. Pipette 100 µl of **TMB Substrate Solution** to all wells, including the blank wells.
- i. Incubate the microwell strips at room temperature (18° to 25°C) for about 10 minutes. Avoid direct exposure to intense light.

The colour development on the plate should be monitored and the substrate reaction stopped (see point j. of this protocol) before positive wells are no longer properly recordable.

It is recommended to add the stop solution when the highest standard has developed a dark blue colour.

Alternatively the colour development can be monitored by the ELISA reader at 620 nm. The substrate reaction should be stopped as soon as the standard 1 has reached an OD of 0.9 – 0.95.

- j. Stop the enzyme reaction by quickly pipetting 100 µl of **Stop Solution** into each well, including the blank wells. It is important that the Stop Solution is spread quickly and uniformly throughout the microwells to completely inactivate the enzyme. Results must be read immediately after the Stop Solution is added or within one hour if the microwell strips are stored at 2 - 8°C in the dark.
- k. Read absorbance of each microwell on a spectro-photometer using 450 nm as the primary wave length (optionally 620 nm as the reference wave length; 610 nm to 650 nm is acceptable). Blank the plate reader according to the manufacturer's instructions by using the

blank wells. Determine the absorbance of both the samples and the human sL-selectin standards.

Note: In case of incubation without shaking the obtained O.D. values may be lower than indicated below. Nevertheless the results are still valid.

11 Calculation of Results

- Calculate the average absorbance values for each set of duplicate standards and samples. Duplicates should be within 20 per cent of the mean.
- Create a standard curve by plotting the mean absorbance for each standard concentration on the ordinate against the human sL-selectin concentration on the abscissa. Draw a best fit curve through the points of the graph.
- To determine the concentration of circulating human sL-selectin for each sample, first find the mean absorbance value on the ordinate and extend a horizontal line to the standard curve. At the point of intersection, extend a vertical line to the abscissa and read the corresponding human sL-selectin concentration.
- ***Samples have been diluted 1:200, thus the concentration read from the standard curve must be multiplied by the dilution factor (x 200).**
- **Calculation of samples with a concentration exceeding standard 1 may result in incorrect, low human sL-selectin levels (possible Hook Effect). Such samples require further external predilution according to expected human sL-selectin values with Sample Diluent in order to precisely quantitate the actual human sL-selectin level.**
- It is suggested that each testing facility establishes a control sample of known human sL-selectin concentration and runs this additional control with each assay. If the values obtained are not within the expected range of the control, the assay results may be invalid.
- A representative standard curve is shown in Figure 4. This curve cannot be used to derive test results. Every laboratory must prepare a standard curve for each group of microwell strips assayed.

* N.B: There is a common dilution factor for samples due to the conjugate which must then be included in the calculation. The samples contribute 100 μl to the final volume per well. These 100 μl are composed of 50 μl of sample diluent plus 50 μl of the 1:100 prediluted sample. This is a 1:200 dilution.

The remaining 50 μl to give 150 μl are due to the addition of 50 μl conjugate to all wells.

50 μl sample diluent and 50 μl conjugate results in 100 μl reconstitution volume, addition of 50 μl 1:100 prediluted sample (50 μl + 50 μl 1:100 prediluted sample = 1:200 dilution)

Figure 4

Representative standard curve for human sL-selectin Instant ELISA. Human sL-selectin was diluted in serial 2-fold steps in Sample Diluent, each symbol represents the mean of 3 parallel titrations.

Do not use this standard curve to derive test results. A standard curve must be run for each group of microwell strips assayed.

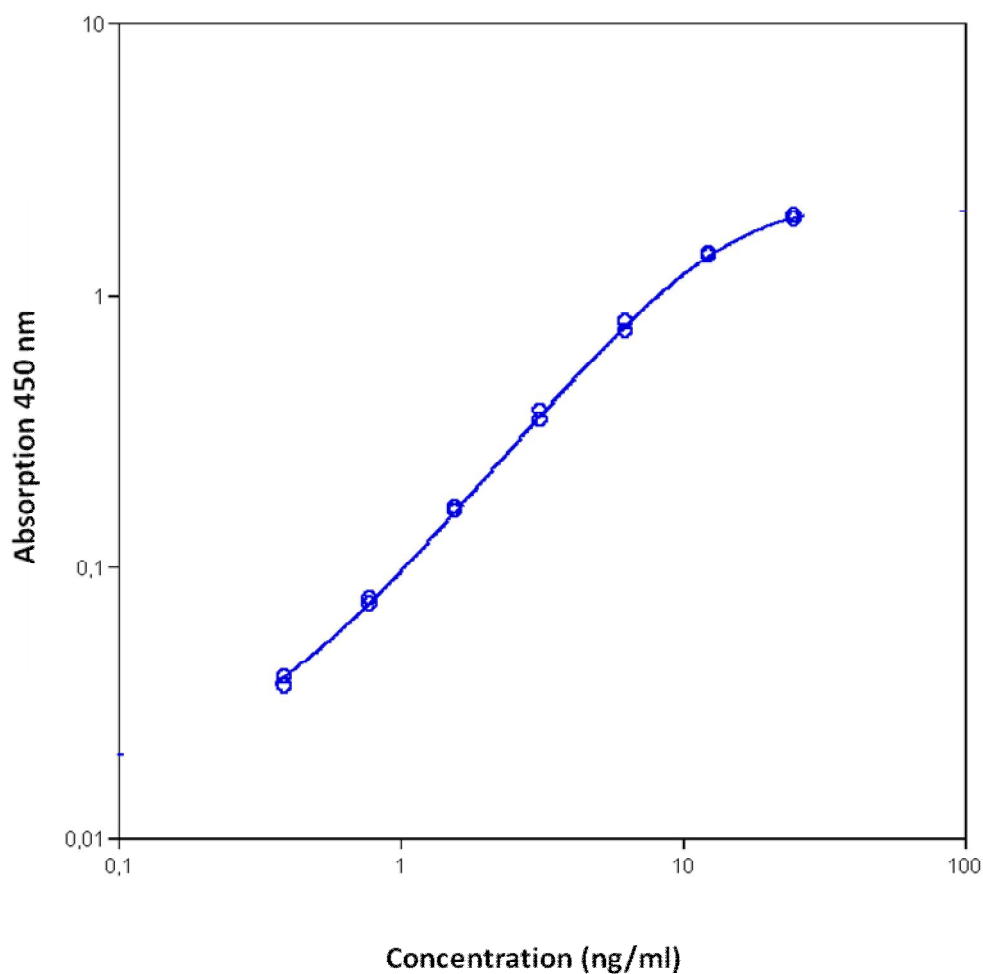


Table 2

Typical data using the human sL-selectin INSTANT ELISA

Measuring wavelength: 450 nm

Reference wavelength: 620 nm

Standard	human sL-selectin Concentration (ng/ml)	O.D. (450 nm)	O.D. Mean	C.V. (%)
1	25.00	1.942 1.890	1.916	1.9
2	12.50	1.412 1.384	1.398	1.4
3	6.25	0.799 0.737	0.768	5.7
4	3.13	0.346 0.373	0.360	5.3
5	1.56	0.159 0.165	0.162	2.6
6	0.78	0.073 0.077	0.075	3.8
7	0.39	0.039 0.036	0.038	5.7
Blank	0.00	0.008 0.009	0.009	8.3

The OD values of the standard curve may vary according to the conditions of assay performance (e.g. operator, pipetting technique, washing technique or temperature effects). Furthermore shelf life of the kit may affect enzymatic activity and thus colour intensity. Values measured are still valid.

12 Limitations

- Since exact conditions may vary from assay to assay, a standard curve must be established for every run.
- Bacterial or fungal contamination of either screen samples or reagents or cross-contamination between reagents may cause erroneous results.
- Disposable pipette tips, flasks or glassware are preferred, reusable glassware must be washed and thoroughly rinsed of all detergents before use.
- Improper or insufficient washing at any stage of the procedure will result in either false positive or false negative results. Empty wells completely before dispensing fresh wash solution, fill with Wash Buffer as indicated for each wash cycle and do not allow wells to sit uncovered or dry for extended periods.
- The use of radioimmunotherapy has significantly increased the number of patients with human anti-mouse IgG antibodies (HAMA). HAMA may interfere with assays utilizing murine monoclonal antibodies leading to both false positive and false negative results. Serum samples containing antibodies to murine immunoglobulins can still be analysed in such assays when murine immunoglobulins (serum, ascitic fluid, or monoclonal antibodies of irrelevant specificity) are added to the Sample.

13 Performance Characteristics

13.1 Sensitivity

The limit of detection of human sL-selectin defined as the analyte concentration resulting in an absorbance significantly higher than that of the dilution medium (mean plus 2 standard deviations) was determined to be 0.198 ng/ml (mean of 6 independent assays).

13.2 Reproducibility

13.2.1 Intra-assay

Reproducibility within the assay was evaluated in 3 independent experiments. Each assay was carried out with 6 replicates of 6 serum samples containing different concentrations of human sL-selectin. 2 standard curves were run on each plate. Data below show the mean human sL-selectin concentration and the coefficient of variation for each sample (see Table 3). The calculated overall intra-assay coefficient of variation was 9.2%.

Table 3

The Mean human sL-selectin concentration and the coefficient of variation for each sample.

Positive Sample	Experiment	human sL-selectin Concentration (ng/ml)	Coefficient of Variation (%)
1	1	1529	12
	2	1733	10
	3	1842	10
2	1	1416	16
	2	1335	1
	3	1569	7
3	1	3530	9
	2	2988	9
	3	2402	12
4	1	1270	13
	2	1274	4
	3	1265	13
5	1	2059	6
	2	1719	2
	3	1663	8
6	1	2012	10
	2	1773	7
	3	1580	11

13.2.2 Inter-assay

Assay to assay reproducibility within one laboratory was evaluated in 3 independent experiments by 3 technicians. Each assay was carried out with 6 replicates of 6 serum samples containing different concentrations of human sL-selectin. 2 standard curves were run on each plate. Data below (see Table 4) show the mean human sL-selectin concentration and the coefficient of variation calculated on 18 determinations of each sample. The calculated overall coefficient of variation was 10.0%.

Table 4

The mean human sL-selectin concentration and the coefficient of variation calculated on 18 determinations of each sample.

Sample	human sL-selectin Concentration (ng/ml)	Coefficient of Variation (%)
1	1702	9.3
2	1440	8.3
3	2973	19.0
4	1270	0.4
5	1814	11.8
6	1788	12.1

13.3 Spike Recovery

The spike recovery was evaluated by spiking 4 levels of human sL-selectin into normal human serum. Recoveries were determined in 3 independent experiments with 6 replicates each. The unspiked serum was used as blank in these experiments. Average recovery ranged from 80% to 126% with an overall mean recovery of 104%.

13.4 Dilution Parallelism

4 serum samples with different levels of human sL-selectin were analysed at serial 2 fold dilutions with 4 replicates each. The recovery ranged between 80% and 123% with an overall recovery of 93%.

13.5 Sample Stability

13.5.1 Freeze-Thaw Stability

Aliquots of serum samples (unspiked or spiked) were stored at -20°C and thawed 5 times, and the human sL-selectin levels determined. There was no significant loss of human sL-selectin immunoreactivity between 0 and 5 freeze-thaw cycles.

13.5.2 Storage Stability

Aliquots of serum samples (spiked or unspiked) were stored at -20°C, 2-8°C, room temperature (RT) and at 37°C, and the human sL-selectin level determined after 24 h. There was no significant loss of human sL-selectin immunoreactivity between 0 and 5 freeze-thaw cycles.

13.6 Specificity

The assay detects both natural and recombinant human sL-selectin. To define the specificity of this ELISA several proteins were tested for cross reactivity. There was no cross reactivity observed for IL-8, sICAM-1, sTNF-R, TNF- α , TNF- β , CD8, IL-2, IL-2R, IL-6, IL-6R, IL-10, sE-selectin, CD44 and HER-2.

13.7 Expected Values

A panel of 22 randomly selected sera from healthy blood donors (male and female) was tested for human sL-selectin. The detected human sL-selectin levels ranged between 487.3 and 1096.3 ng/ml with a mean level of 842 ng/ml and a standard deviation of \pm 168.9 ng/ml.

14 Ordering Information

North America

Technical Support:

Research Products:
888.810.6168
858.642.2058
tech@eBioscience.com

Clinical Products:
877.726.8559
858.642.2058
tech@eBioscience.com

Customer Service:

888.999.1371
858.642.2058
info@eBioscience.com

Fax:

858.642.2046

Europe/International*

Technical Support:

+43 1 796 40 40-120
tech@eBioscience.com

Customer Service:

+43 1 796 40 40-304
europe@eBioscience.com

Fax:

+43 1 796 40 40-400



Bender MedSystems GmbH
Campus Vienna Biocenter 2
1030 Vienna, Austria
www.eBioscience.com

* Customers outside North America and Europe may contact their eBioscience distributor listed on our website at www.eBioscience.com/distributors.

15 Reagent Preparation Summary

15.1 Wash Buffer (1x)

Add **Wash Buffer Concentrate** 20 x (25 ml) to 475 ml distilled water

16 Test Protocol Summary

- Predilute sample with Sample Diluent
- Place standard strips in position A1/A2 to H1/H2.
- Add distilled water, in duplicate, to all standard and blank wells as indicated on the label of the standard strips.
- Add 100 µl distilled water to sample wells.
- Add 50 µl 1:100 prediluted Sample to designated wells.
- Cover microwell strips and incubate 2 hours at room temperature (18° to 25°C) if available on a microplate shaker at 400 rpm.
- Empty and wash microwell strips 3 times with 400 µl Wash Buffer.
- Add 100 µl of TMB Substrate Solution to all wells including blank wells.
- Incubate the microwell strips for about 10 minutes at room temperature (18° to 25°C).
- Add 100 µl Stop Solution to all wells including blank wells.
- Blank microwell reader and measure colour intensity at 450 nm.

Note: Samples have been diluted 1:200, thus the concentration read from the standard curve must be multiplied by the dilution factor (x 200).

PRODUKTINFORMATION UND HANDBUCH (Deutsch)

1 Mitgelieferte Reagenzien

- 1 Aluminiumbeutel mit **Mikrotiterplatte**, beschichtet mit monoklonalem Antikörper (von der Maus) gegen human sL-selectin, **HRP-Konjugat** (monoklonaler Anti-sL-selectin Antikörper von der Maus) und Verdünnungslösung,, lyophilisiert.
- 2 Aluminiumbeutel mit einer human sL-selectin-**Standardkurve** (farbig)
- 1 Flasche (25 ml) **Waschpufferkonzentrat** 20x (PBS mit 1% Tween 20)
- 1 Fläschchen (15 ml) **Substratlösung** (Tetramethylbenzidin)
- 1 Flasche (50 ml) **Verdünnungslösung** (Verwendung zur Vorverdünnung von Proben)
- 1 Fläschchen (15 ml) **Stopplösung** (1 M Phosphorsäure)
- 2 **Klebefolien**

2 Lagerhinweise

Lagern Sie die ELISA Platte und Standardkurven oder den ganzen Kit bei -20°C . Die Platte und Standardkurven können auch herausgenommen und bei -20°C gelagert werden, die verbleibenden Reagenzien können bei $2-8^{\circ}\text{C}$ gelagert werden. Das Ablaufdatum des Kits und der Reagenzien ist auf den Etiketten angegeben. Haltbarkeit des Kits und der Komponenten kann nur bei sachgemäßer Lagerung garantiert werden, sowie bei mehrfacher Verwendung nur dann, wenn die Reagenzien bei der ersten Verwendung nicht kontaminiert wurden.

3 Sicherheitsvorkehrungen für den Gebrauch

- Alle enthaltenen Reagenzien sollten als potenziell gefährlich betrachtet werden. Daher wird empfohlen, dass dieses Produkt nur von Personen mit labortechnischer Erfahrung und in Übereinstimmung mit GLP Richtlinien verwendet wird. Passende Schutzbekleidung, wie Labormäntel, Sicherheitsbrillen und Laborhandschuhe müssen getragen werden. Vermeiden Sie jeden Kontakt der Reagenzien mit Haut oder Augen. Im Falle des Kontaktes von Reagenzien mit Haut oder Augen, sofort mit Wasser spülen. Bitte entnehmen Sie weitere spezifische Hinweise den Sicherheitsdatenblättern und/oder den Sicherheitsbestimmungen.
- Die Reagenzien sind ausschließlich für Diagnosezwecke bestimmt und nicht für den Einsatz bei Therapien.
- Reagenzien aus verschiedenen Chargen oder anderer Herkunft nicht mischen oder untereinander austauschen.
- Verwenden Sie die Kitreagenzien nicht nach dem Ablaufdatum (siehe Etikett).
- Setzen Sie die Kitreagenzien während der Lagerung oder Inkubation keiner starken Lichteinstrahlung aus.
- Nicht mit dem Mund pipettieren.
- In Bereichen, in denen mit Kitreagenzien oder Proben hantiert wird, nicht essen, trinken oder rauchen.
- Vermeiden Sie den Kontakt der Haut/Schleimhäute mit Kitreagenzien/Proben.
- Tragen Sie während des Hantierens mit Kitreagenzien oder Proben geeignete Gummi- oder Einweghandschuhe.
- Vermeiden Sie den Kontakt zwischen Substratlösung und Oxidationsmitteln/Metallen.
- Vermeiden Sie Spritzer oder Bildung von Aerosolen.
- Zur Vermeidung von Kontamination mit Mikroben oder Kreuzkontamination der Reagenzien oder Proben, die den Test

ungültig machen könnten, verwenden Sie Einwegpipettenspitzen und/oder Einwegpipetten.

- Verwenden Sie saubere, geeignete Reagenzgefäße für das Dispensieren von Konjugat und Substratreagenzien.
- Säureeinwirkung inaktiviert das Konjugat.
- Für die Reagenzherstellung muss destilliertes oder entionisiertes Wasser verwendet werden.
- Die Substratlösung muss vor der Verwendung auf Raumtemperatur gebracht werden.
- Dekontaminieren und entsorgen Sie Proben sowie alle möglicherweise kontaminierten Materialien so, als ob sie Infektionserreger enthalten könnten. Die bevorzugte Dekontaminationsmethode ist Autoklavieren für mind. eine Stunde bei 121,5°C.
- Flüssige Abfälle, die kein Säure enthalten, sowie neutralisierte Abfälle werden zur Dekontamination mit Natrium Hypochlorit versetzt (Endkonzentration von Natrium Hypochlorit 1.0%). Nach 30 min ist eine effektive Dekontamination erreicht. Flüssige Abfälle, die Säure enthalten, müssen vor der Dekontamination neutralisiert werden.

4 Vorbereitung der Reagenzien

Bringen Sie das Pufferkonzentrat auf Raumtemperatur und stellen Sie die Verdünnung vor Beginn des Tests her. Sollten sich im Pufferkonzentrat Kristalle gebildet haben, erwärmen Sie es vorsichtig bis zur vollständigen Auflösung der Kristalle.

4.1 Waschpuffer (1x)

Leeren Sie den gesamten Inhalt (25 ml) des Waschpufferkonzentrats (20x) in einen sauberen 500-ml-Messzylinder. Füllen Sie mit destilliertem oder entionisiertem Wasser auf, bis ein Endvolumen von 500 ml erreicht ist. Vorsichtig mischen, um Schäumen zu vermeiden.

In eine saubere Waschflasche umfüllen und bei 2° bis 25°C lagern. Bitte beachten Sie, dass der Waschpuffer (1x) 30 Tage haltbar ist.

5 Testprotokoll

- **Verwenden Sie die Platte sofort nach Entnahme von -20°C!**
 - **Warten Sie mit dem Auftragen der Proben nicht bis zur vollständigen Auflösung der Lyophilisate – die Bindereaktion in den Standardstreifen beginnt sofort nach Beigabe von Wasser!**
 - **Versuchen Sie nicht, die Lyophilisate mittels Auf- und Abpipettieren in den Vertiefungen aufzulösen – Teile des Lyophilisats könnten dabei an der Spitze hängen bleiben und starke Abweichungen der Ergebnisse bewirken.**
 - **Führen Sie den Waschschrift mit mind. 400 µl Waschpuffer durch wie in der Anleitung beschrieben, oder füllen Sie die Vertiefungen vollständig – andernfalls werden allfällige Lyophilisatrückstände am Rand der Vertiefung nicht entfernt und bewirken starke Abweichungen der Ergebnisse.**
 - **Lassen Sie den Waschpuffer einige Sekunden einwirken bevor Sie ihn absaugen.**
 - **Entfernen Sie die Abdeckungen der Standardstreifen vorsichtig, sodass alle Lyophilisate in den Vertiefungen bleiben.**
- a. a. Verdünnen Sie Serum oder Plasma Proben 1:100 nach dem folgenden Schema:
- I. 5 µl Probe + 495 Probenverdünnung oder alternativ
 - II. 10 µl Probe + 90µl Probenverdünnung von dieser 1:10 Verdünnung 50 µl + 450 µl Probenverdünnung.
- b. Bestimmen Sie die Anzahl der **Mikrowellstreifen** die für das Testen der gewünschten Anzahl von Proben benötigt werden sowie die **Mikrowellstreifen** für Blindproben und Standards (**farbig**). Probe, Standard, Blindprobe und optionale Kontrollprobe immer jeweils doppelt testen. Entfernen Sie die zusätzlichen **Mikrowellstreifen** von der Halterung und bewahren Sie diese mit dem mitgelieferten Trockenmittel in dem Folienbeutel fest verschlossen bei -20°C auf. Bringen Sie die Mikrowellstreifen mit der Standardkurve in Position A1/A2 bis H1/H2 (siehe Table 5).
- c. Pipettieren Sie **destilliertes Wasser** in alle **Standardvertiefungen** und Blindprobenvertiefungen wie auf dem Etikett der Standardstreifen angegeben (A1, A2 bis H1, H2).
- d. Pipettieren Sie in alle **Probenvertiefungen** 100 µl **destilliertes Wasser**.

Table 5

Diagramm mit Beispiel für die Anordnung von Blindproben, Standards und Proben in den Mikrowellstreifen:

	1	2	3	4
A	Standard 1 (25.00 ng/ml)	Standard 1 (25.00 ng/ml)	Probe 1	Probe 1
B	Standard 2 (12.50 ng/ml)	Standard 2 (12.50 ng/ml)	Probe 2	Probe 2
C	Standard 3 (6.25 ng/ml)	Standard 3 (6.25 ng/ml)	Probe 3	Probe 3
D	Standard 4 (3.13 ng/ml)	Standard 4 (3.13 ng/ml)	Probe 4	Probe 4
E	Standard 5 (1.56 ng/ml)	Standard 5 (1.56 ng/ml)	Probe 5	Probe 5
F	Standard 6 (0.78 ng/ml)	Standard 6 (0.78 ng/ml)	Probe 6	Probe 6
G	Standard 7 (0.39 ng/ml)	Standard 7 (0.39 ng/ml)	Probe 7	Probe 7
H	Blindprobe	Blindprobe	Probe 8	Probe 8

- e. Pipettieren Sie je **50 µl von jeder 1:100 vorverdünnten Probe** (Doppelbestimmung) in die Probenvertiefungen und mischen Sie den Inhalt durch.
- f. Mit einer **Klebefolie** abdecken und bei Raumtemperatur (18° bis 25°C) für 2 Stunden inkubieren, wenn möglich auf einem Schüttler bei 100 U/min.
- g. Entfernen Sie die **Klebefolie** und entleeren Sie die Vertiefungen
Waschen Sie die Mikrowellstreifen 3 mal mit ca. **400 µl Waschpuffer** pro Vertiefung; zwischen den Waschgängen den Inhalt der Vertiefungen gründlich absaugen. Achten Sie darauf, die Oberfläche der Vertiefungen nicht zu zerkratzen.

- h. Leeren Sie die Vertiefungen nach dem letzten Waschschrift und klopfen Sie die Mikrowellstreifen auf einem Saug- oder Papiertuch aus, um überschüssigen Waschpuffer zu entfernen. Verwenden Sie die Mikrowellstreifen sofort nach dem Waschen, oder legen Sie diese für maximal 15 Minuten umgedreht auf ein nasses Saugtuch. Lassen Sie die Vertiefungen nicht austrocknen
- i. Pipettieren Sie in alle Vertiefungen, einschließlich der Blindprobenvertiefungen, 100 µl **TMB-Substratlösung**.
- j. Inkubieren Sie die Mikrowellstreifen bei Raumtemperatur (18° bis 25°C) für ca. 10 Minuten. Vermeiden Sie direkte, starke Lichteinstrahlung. Die Farbentwicklung innerhalb der einzelnen Vertiefungen muss beobachtet und die Substratreaktion gestoppt werden, bevor die gefärbten wells nicht mehr richtig gemessen können. Es wird empfohlen, die Stopplösung zuzugeben, wenn der höchste Standardpunkt eine dunkelblaue Farbe angenommen hat. Alternativ kann die Farbentwicklung auch mit einem Photometer bei 620 nm verfolgt werden. Die Substratreaktion sollte gestoppt werden, wenn der höchste Standardpunkt eine OD von 0.9-0.95 erreicht.
- k. Stoppen Sie die Enzymreaktion durch rasches Pipettieren von 100 µl Stopplösung in jede Vertiefung, einschließlich der Blindprobenvertiefungen. Für eine vollständige Inaktivierung der Enzyme ist es wichtig, die Stopplösung rasch und gleichmäßig in die Vertiefungen zu verteilen. Die OD Werte müssen sofort nach Beigabe der Stopplösung oder innerhalb einer Stunde nach Lagerung der Mikrowellstreifen in Dunkelheit bei 2-8°C gemessen werden.
- l. Messen Sie die Absorption jeder Vertiefung mit einem Spektrophotometer, verwenden Sie dabei 450 nm als primäre Wellenlänge (optional 620 nm als Referenzwellenlänge; 610 nm bis 650 nm sind möglich). Stellen Sie das Plattenmessgerät nach Anleitung des Herstellers und unter Verwendung der Blindprobenvertiefungen auf den Leerwert ein Bestimmen Sie die Absorption der Proben wie auch der human sL-selectin-Standards.

Die Proben wurden im Zuge der Testdurchführung 1:200 verdünnt. Daher muss der aus der Standardkurve berechnete Wert mit dem Verdünnungsfaktor multipliziert werden (x 200).

INFORMACIÓN Y MANUAL DEL PRODUCTO (Español)

1 Reactivos Suministrados

- 1 bolsa de aluminio con una **placa de pocillos recubiertos con anticuerpos monoclonales** (murinos) anti-sL-selectin humano, diluyente para muestras y **conjugado HRP** [anticuerpos (murinos) monoclonales anti-sL-selectin], liofilizado
- 2 bolsas de aluminio con una **curva de valoración** human sL-selectin (en color)
- 1 frasco (25 ml) de concentrado de **tampón de lavado** 20x (PBS con Tween 20 al 1%)*
- 1 vial (15 ml) de **solución de sustrato** (tetrametil-bencidina)
- 1 vial (50 ml) de **diluyente de muestras**
- 1 vial (15 ml) de **solución de parada** (ácido fosfórico 1M)
- 2 **tapas para placas, adhesives**

2 Instrucciones de Conservación

Conservar la placa de ELISA o el kit completo a -20°C . También se puede sacar la placa para conservarla a -20°C y conservar los demás reactivos del kit a una temperatura comprendida entre 2 y 8°C . En las etiquetas figuran las fechas de caducidad del kit y de los reactivos. Sólo se podrá garantizar la fecha de caducidad de los componentes del *kit* si se conservan adecuadamente y, en caso de uso reiterado de un mismo componente, si el reactivo no queda contaminado en la primera manipulación.

3 Precauciones de uso

- Todos los productos químicos deben considerarse potencialmente peligrosos. Por tanto, recomendamos que este producto sea manipulado únicamente por aquellas personas que hayan sido entrenadas en técnicas de laboratorio y que sea usado de acuerdo con los principios de buenas prácticas de laboratorio. Se debe llevar ropa de protección apropiada como puedan ser las batas de laboratorio, gafas de seguridad y guantes. Se debe trabajar con cuidado para evitar cualquier contacto con piel y ojos. En el caso de que tenga lugar un contacto con piel u ojos, proceder de forma inmediata a lavar la parte afectada con abundante agua. Véase la(s) hoja(s) de seguridad y/o declaraciones de seguridad para recomendaciones específicas.
- Los reactivos están destinados para un uso en diagnóstico in vitro y no se deben usar en procedimientos terapéuticos.
- No mezclar o sustituir los reactivos por los equivalentes de otros lotes u otras fuentes.
- No usar reactivos caducados.
- No exponer los reactivos del kit a una luz intensa durante su almacenamiento o incubación.
- No pipetear con la boca.
- No se recomienda comer o fumar en las zonas donde se manipulen muestras o reactivos.
- Evitar el contacto de los reactivos del kit o de las muestras con piel o mucosas.
- Se recomienda el uso de guantes desechables de goma o látex durante la manipulación de las muestras y reactivos.
- Evitar el contacto de la solución de sustrato con agentes oxidantes y metales.
- Evitar salpicaduras y la generación de aerosoles.

- Con el propósito de evitar una contaminación microbiológica o contaminaciones cruzadas de reactivos y muestras que puedan invalidar el test se recomienda el uso de pipetas y/o puntas de pipetas de un solo uso.
- Usar recipientes limpios y específicos de reactivos para la dispensación de reactivos de sustrato.
- Se debe usar agua destilada o deionizada en la preparación de los reactivos.
- La solución de sustrato debe de estar a temperatura ambiente antes de su uso.
- Descontaminar y disponer las muestras y todos los materiales potencialmente contaminados como si pudieran contener agentes infecciosos. El método preferente de descontaminación es un autoclavado durante un mínimo de 1 hora a 121.5°C.
- Los residuos líquidos que no contengan ácido y los residuos neutralizados pueden ser mezclados con hipoclorito sódico en volúmenes tales que la mezcla final contenga 1.0% de hipoclorito sódico. Dejar actuar durante 30 minutos para una efectiva descontaminación. Los residuos líquidos que contengan ácido deben ser neutralizados previamente a la adición de hipoclorito sódico.

4 Preparación de los Reactivos

El tampón concentrado debe de alcanzar la temperatura ambiente y ser diluido antes de iniciar el procedimiento del test. Si en el concentrado de tampón concentrado se han formado cristales, caliente suavemente hasta su completa disolución.

4.1 Tampón de Lavado (1x)

Vierta todo el contenido (25 ml) del concentrado de tampón de lavado (20x) en un matraz aforado de 500 ml limpio. Enrase en matraz con agua destilada o desionizada. Mezcle suavemente para evitar la formación de espuma.

Transfiera la solución a un frasco de lavado limpio y consérvela a una temperatura entre 2°C y 25°C. El Tampón de lavado (1x) permanece estable durante 30 días.

5 Protocolo de Ensayo

- Utilice la placa inmediatamente después de extraerla del congelador a -20°C
 - Al aplicar las muestras, no espere a la disolución total de las microcápsulas ya que la reacción de unión a las tiras de patrón se inicia inmediatamente después de añadir el agua.
 - No intente disolver las microcápsulas pipeteando por los pocillos ya que algunas partes de las microcápsulas podrían quedar adheridas a la punta y alterar considerablemente los resultados
 - En la etapa de lavado, emplee al menos $400\ \mu\text{l}$ de tampón de lavado como se indica en el manual o llene los pocillos totalmente ya que, de lo contrario, podrían quedar restos de microcápsulas en los bordes de los pocillos que alterarían considerablemente los resultados
 - Permitir que el tampón de lavado añadido a los pocillos permanezca unos segundos antes de ser aspirado.
 - Retire las tapas de las tiras de patrón con cuidado para que todas las microcápsulas liofilizadas permanezcan en los pocillos
- a. Diluya las muestras de suero o de plasma en una proporción 1:100 con el diluyente de muestras de acuerdo con una de las siguientes opciones:
- I. $5\ \mu\text{l}$ de muestra + $495\ \mu\text{l}$ de diluyente de muestras o bien
 - II. $10\ \mu\text{l}$ de muestra + $90\ \mu\text{l}$ de diluyente de muestras, tome $50\ \mu\text{l}$ de esta muestra diluida al 1:10 y añada $450\ \mu\text{l}$ de diluyente de muestras.
- b. Determine el número de tiras necesarias para analizar el número deseado de muestras y además añada las **tiras** para blancos y patrones (**de color**). Todas las muestras, patrones, blancos y las posibles muestras de control deben ser analizadas por duplicado. Retire del soporte las **tiras** sobrantes y consérvelas, junto con el desecante suministrado en una bolsa metalizada y cerrada herméticamente, a una temperatura de -20°C . Coloque las tiras que contienen la curva de valoración en las posiciones A1/A2 a H1/H2 (véase la Table 6).

- c. Añada **agua destilada** a los **pocillos del patrón y del blanco** como se indica en la etiqueta de las tiras de patrón (A1, A2 a H1, H2).
- d. Añada 100 µl de **agua destilada** a los **pocillos con muestras**.
- e. Por duplicado, añada 50 µl de cada **muestra** diluida 1:100 a los pocillos designados y mezcle los contenidos.

Table 6

Tabla que representa un ejemplo de la disposición de los blancos, estándares y muestras en las tiras de micropocillos.

	1	2	3	4
A	Patrón 1 (25.00 ng/ml)	Patrón 1 (25.00 ng/ml)	Muestra 1	Muestra 1
B	Patrón 2 (12.50 ng/ml)	Patrón 2 (12.50 ng/ml)	Muestra 2	Muestra 2
C	Patrón 3 (6.25 ng/ml)	Patrón 3 (6.25 ng/ml)	Muestra 3	Muestra 3
D	Patrón 4 (3.13 ng/ml)	Patrón 4 (3.13 ng/ml)	Muestra 4	Muestra 4
E	Patrón 5 (1.56 ng/ml)	Patrón 5 (1.56 ng/ml)	Muestra 5	Muestra 5
F	Patrón 6 (0.78 ng/ml)	Patrón 6 (0.78 ng/ml)	Muestra 6	Muestra 6
G	Patrón 7 (0.39 ng/ml)	Patrón 7 (0.39 ng/ml)	Muestra 7	Muestra 7
H	blanco	blanco	Muestra 8	Muestra 8

- f. Cubra la **placa con una tapa** e incúbela a temperatura ambiente (18°C - 25°C) durante 2 horas (en un agitador mecánico a 400 rpm, si es posible).
- g. Retire la **tapa** y vacíe los pocillos. Lave 3 veces las tiras con aproximadamente 400 µl de tampón de lavado por cada pocillo,

aspirando completamente el contenido de los pocillos entre cada lavado. Evite rayar la superficie de los pocillos.

- h. Tras el último lavado, golpee suavemente las tiras contra un papel absorbente o una toallita de papel para eliminar el exceso de tampón de lavado. Utilice las tiras inmediatamente después de lavadas o bien colóquelas boca abajo sobre un papel absorbente húmedo durante como máximo 15 minutos. No deje secar los pocillos.
- i. Pipetee 100 μ l de **solución de sustrato TMB** y viértalos en todos los pocillos, incluidos los del blanco.
- j. Incube las tiras a temperatura ambiente (18°C - 25°C) durante aproximadamente 10 minutos. Evite la exposición directa a la luz intensa. **Deben monitorizarse los valores DO de la placa para detener la reacción del sustrato antes de que deje de ser posible registrar correctamente los pocillos positivos.** Se recomienda añadir la solución de parada cuando el estándar más alto presente un color azul oscuro. Alternativamente el desarrollo de color puede ser monitorizado con un lector de placas de ELISA a 620 nm. La reacción del sustrato debería ser parada cuando este estándar alcance una OD entre 0.9 y 0.95.
- k. Detenga la reacción enzimática pipeteando rápidamente 100 μ l de **solución de parada** en cada pocillo, incluidos los del blanco. Es importante dispensar la solución de parada de forma rápida y uniforme en todos los pocillos para inactivar totalmente la enzima. Los resultados deben leerse inmediatamente después de añadir la solución de parada o, como máximo, en el plazo de 1 hora si las tiras se conservan a una temperatura entre 2 - 8°C en un lugar oscuro.
- l. Lea la absorbancia de cada pocillo en un espectrofotómetro utilizando 450 nm como longitud de onda principal (opcionalmente 620 nm como longitud de onda de referencia; los valores comprendidos entre 610 nm y 650 nm son aceptables). Utilizando los pocillos de blanco, haga el blanco del lector de placas de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Determine la absorbancia de las muestras y de los patrones human sL-selectin.

Las muestras han sido diluidas 1:200, por tanto la concentración leída a partir de la curva estándar debe ser multiplicada por el factor de dilución (x200).

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT ET MANUEL (Français)

1 Réactifs Fournis

- 1 pochette en aluminium contenant une **plaque de microtitration** recouverte d'anticorps monoclonaux (murins) anti-sL-selectin humaine, un diluant d'échantillon et le **conjugué HRP** (anticorps monoclonaux murins anti-sL-selectin), lyophilisés
- 2 pochettes en aluminium contenant **une courbe étalon** human sL-selectin (colorée)
- 1 flacon (25 ml) de **tampon de lavage** concentré 20 x (tampon phosphate avec du Tween 20 1%)
- 1 flacon (15 ml) de **solution de substrat** (tétraméthyle-benzidine)
- 1 flacon (50 ml) de **diluant d'échantillon**
- 2 flacon (15 ml) de **solution d'arrêt** (acide phosphorique 1 M)
- 2 **Couvre-plaques adhésifs**

2 Instruction de Stockage

Conserver la plaque ELISA, les courbes étalons et le contrôle ou le kit complet à -20°C. La plaque, les courbes étalons et le contrôle peuvent également être retirées pour être conservées à -20°C, le reste du kit étant conservé entre 2 et 8°C. La date de péremption du kit est spécifiée sur les étiquettes.

Le délai de péremption du kit ne peut être garanti que si les composants sont conservés correctement et si, en cas d'utilisation répétée d'un composant, le réactif n'a pas été contaminé lors d'une première utilisation.

3 Préventions de Sécurité pour l'Usage

- Tout réactifs doivent être considérés comme potentiellement dangereux. Pour cela il est recommandé que ce produit est utilisé que par des personnes ayant une qualification de laboratoire et qu'il soit utilisé à l'avenant au code GLP. Une tenue correspondante comme des une blouse de travail, des lunettes protectrices et des gants de travail doivent-être portés. Evitez tous contacts de réactifs avec la peau ou les yeux. En cas de contact avec les yeux ou la peau rincez immédiatement avec de l'eau. Veuillez consulter tous conseils spécifiques dans les fiches de données de sécurité et/ou les les règles de sécurité.
- Les réactifs sont réservés exclusivement au diagnostique et non pas au thérapeutique.
- Evitez de mélanger et d'échanger les réactifs de lots différents et de provenance différents.
- Evitez l'utilisation des réactifs périmés (voyez étiquette).
- N'exposez pas les réactifs à la lumière pendant le stockage ou l'incubation.
- Ne pas pipeter avec la bouche
- Ne pas manger, boire ou fumer dans les zones de manipulation de réactifs et d'échantillons.
- Evitez le contact de la peau et des muqueuses avec les réactifs.
- Pendant le travail avec les réactifs, utilisez des gants appropriés.
- Evitez le contact de substrats avec des métaux/oxydant.
- Evitez de gicler des liquides et la formation d'Aérosols.
- A fin d'éviter des contaminations avec microbes ou contaminations de réactifs et d'échantillons qui pourraient rendre le test sans valeur, veuillez utiliser des pointes de pipettes jetables.
- Utilisez des tubes appropriés pour dispenser le conjugué et le substrat.

- Pour la préparation des réactifs de l'eau distillée ou déionisé doit être utilisée.
- La solution de substrat doit être rendue a température ambiante avant usage.
- Décontaminez et éliminez les échantillons et tous matériaux contaminés de manière comme si ils contenaient des germes de maladies infectieuses. La méthode préférée de décontamination est par l'autoclave pour au moins une heure à 121.5 °C.
- Traitez les déchets liquides non-acidiques tel que des déchets neutralisés par l'hypochlorite de sodium (concentration finale d'hypochlorite: 1,0%). Après 30 minutes le décontamination effective est atteinte. Les déchets liquides contenant de l'acide doivent être neutralisés avant la décontamination.

4 Préparation des Réactifs

Mettre le concentré de tampon à une température ambiante et diluer avant de commencer le test. Si des cristaux se sont formés dans le concentré de tampon, chauffer doucement ce dernier jusqu'à la dissolution des cristaux totale.

4.1 Tampon de Lavage (1x)

Verser tout le contenu (25 ml) du concentré de tampon de lavage (20x) dans un cylindre gradué propre de 500 ml. Porter le volume final à 500 ml avec de l'eau distillée dans un alambic en verre ou désionisée. Mélanger doucement pour éviter la formation de mousse.

Transférer tout dans une bouteille de lavage et conserver à une température comprise entre 2° et 25°C. Noter que le tampon de lavage (1x) reste stable pendant 30 jours.

5 Protocole de Test

- Utiliser la plaque immédiatement après son retrait d'un environnement à -20 °C !
 - Ne pas attendre que les pastilles soient complètement dissoutes pour appliquer les échantillons. La réaction de liaison dans les barrettes étalons commence immédiatement après l'ajout d'eau !
 - Ne pas essayer de dissoudre les pastilles en pipetant de haut en bas dans les puits. Certains fragments des pastilles pourraient se coller à l'embout et induire une forte variation des résultats.
 - Procéder à l'étape de lavage avec au moins 400 µl de tampon de lavage comme indiqué dans le manuel ou remplir complètement les puits. Dans le cas contraire, tous les résidus de pastilles collés au bord du puits ne seraient pas éliminés et entraîneraient une forte variation des résultats
 - Laisser le Tampon de lavage dans les puits pendant quelques secondes avant l'aspiration.
 - Retirer délicatement les couvre-plaques des barrettes étalons de manière à ce que toutes les pastilles lyophilisées restent dans les puits
- a. Diluer les échantillons de sérum ou de plasma à 1/100 avec du diluant d'échantillon, en utilisant un des protocoles de dilution suivants :
- I. 5 µl d'échantillon + 495 µl de diluant d'échantillon, ou
 - II. 10 µl d'échantillon + 90 µl de diluant d'échantillon ; prélever 50 µl de cet échantillon
- b. dilué à 1/10 et ajouter 450 µl de diluant d'échantillon.
- c. Déterminer le nombre de barrettes de puits de microtitration nécessaires pour tester le nombre voulu d'échantillons plus les **barrettes** nécessaires aux blancs et aux étalons (**colorés**). Chaque échantillon, étalon, blanc et contrôle (facultatif) doit être testé en double. Retirer les **barrettes de microtitration** inutiles du support et les stocker à -20°C dans une pochette hermétiquement refermée, avec le dessiccateur fourni. Placer les barrettes de puits de microtitration contenant la courbe étalon en position A1/A2 à H1/H2 (voir la Table 7).

- d. Ajouter de l' **eau distillée** comme indiqué sur l' étiquette à tous les puits de standard et "blank" (A1, A2 à H1, H2)
- e. Ajouter 100 µl d'**eau distillée** dans les **puits d'échantillon**.

Table 7

Exemple d'arrangement d'échantillons, de standards et de contrôles vides dans les barrettes de puits de microtitration.

	1	2	3	4
A	Étalon 1 (25.00 ng/ml)	Étalon 1 (25.00 ng/ml)	Échantillon 1	Échantillon 1
B	Étalon 2 (12.50 ng/ml)	Étalon 2 (12.50 ng/ml)	Échantillon 2	Échantillon 2
C	Étalon 3 (6.25 ng/ml)	Étalon 3 (6.25 ng/ml)	Échantillon 3	Échantillon 3
D	Étalon 4 (3.13 ng/ml)	Étalon 4 (3.13 ng/ml)	Échantillon 4	Échantillon 4
E	Étalon 5 (1.56 ng/ml)	Étalon 5 (1.56 ng/ml)	Échantillon 5	Échantillon 5
F	Étalon 6 (0.78 ng/ml)	Étalon 6 (0.78 ng/ml)	Échantillon 6	Échantillon 6
G	Étalon 7 (0.39 ng/ml)	Étalon 7 (0.39 ng/ml)	Échantillon 7	Échantillon 7
H	Blind Échantillon	Blind Échantillon	Échantillon 8	Échantillon 8

- f. Ajouter 50 µl de chaque **échantillon** dilué à 1/100, en double, dans les puits assignés et mélanger le contenu.
- g. Recouvrir avec un **couvre-plaque** et incuber à température ambiante (entre 18 et 25°C) pendant 2 heures, si possible sur un agitateur rotateur réglé à 400 tr/min.

- h. Retirer le **couvre-plaque** et vider les puits. Laver 3 fois les barrettes de puits de microtitration avec environ 400 µl de tampon de lavage pour chaque puits, en aspirant complètement le contenu des puits entre les lavages. Veiller à ne pas rayer la surface des puits de microtitration.
- i. Après le dernier lavage, vider les barrettes de puits et les tapoter sur un tampon absorbant ou une serviette en papier pour éliminer l'excès de tampon de lavage. Utiliser les barrettes de micropuits immédiatement après le lavage ou les placer renversées sur un papier absorbant pendant 15 minutes au maximum. Ne pas laisser sécher les puits.
- j. Pipeter 100 µl de **solution de substrat TMB** dans chaque puits, y compris les puits de blanc.
- k. Incuber les puits de microtitration à température ambiante (entre 18 et 25 C) pendant environ 10 minutes. Éviter toute exposition directe à une source de lumière intense.

Les valeurs de densité optique au niveau de la plaque doivent être surveillées et la réaction du substrat stoppée avant que les puits positifs ne soient plus correctement mesurables.

- l. Il est recommandé d'ajouter la solution stop quand une couleur bleu sombre s'est développée dans le point le plus haut de la gamme standard. Une autre alternative consiste à suivre le développement de la couleur en lecteur ELISA à 620 nm. La réaction du substrat doit être arrêtée dès que la DO atteint 0.9 à 0.95
- m. Arrêter la réaction enzymatique en pipetant rapidement 100 µl de **solution d'arrêt** dans chaque puits, y compris les puits de blanc. Il est important que la solution d'arrêt soit répandue rapidement et uniformément dans les puits pour inactiver complètement l'enzyme. Les résultats doivent être lus immédiatement après l'ajout de la solution d'arrêt ou dans l'heure qui suit si les barrettes de microtitration sont conservées à l'obscurité entre 2 et 8 °C.
- n. Lire l'absorbance de chaque puits sur un spectrophotomètre avec 450 nm comme longueur d'onde primaire (éventuellement 620 nm comme longueur d'onde de référence; 610 à 650 nm sont acceptables). Mesurer le blanc du lecteur de plaque conformément aux instructions du fabricant, en utilisant les puits de blanc.

Déterminer l'absorbance des échantillons et des étalons human sL-selectin.

Les échantillons ont été dilués 1:200 en cours de test. Pour cette raison, la valeur de concentration déterminée par la gamme étalon doit être multipliée par le facteur de dilution (x200).

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO E MANUALE (italiano)

1 Reagenti Forniti

- 1 bustina di alluminio contenente una **piastra micropozzetti** rivestita con anticorpo monoclonale (murino) anti sL-selectin umano, diluente campione e **HRP-coniugato** (anticorpo monoclonale (murino) anti-sL-selectin), liofilizzato
- 2 bustine di alluminio ognuna con **una curva degli étalon** human sL-selectin (colorata)
- 1 bottiglia (25 ml) con **tampone di lavaggio** concentrato 20x (soluzione salina tamponata con 1% Tween 20)*
- 1 flaconcino (15 ml) di **soluzione del substrato** (tetrametilbenzidina)
- 1 flaconcino (50 ml) con **diluente campione**
- 1 flaconcino (15 ml) di soluzione bloccante (acido fosforico 1M)
- 2 **copripiastra adesivi**

2 Istruzioni di Conservazione

Conservare la piastra ELISA e tutto il kit a -20°C . È possibile rimuovere la piastra e conservarla a -20°C , mentre i rimanenti reagenti del kit devono essere conservati tra 2° e 8°C . La scadenza del kit e dei reagenti è indicata sulle etichette.

La data di scadenza dei componenti del kit può essere garantita solo se questi sono conservati correttamente e, in caso di uso ripetuto di un componente, il reagente non è stato contaminato durante la prima manipolazione.

3 Precauzioni per l'Uso

- Tutti i prodotti chimici vanno considerati come potenzialmente pericolosi. Raccomandiamo, perciò, l'utilizzo di questo prodotto solo da personale addestrato alle tecniche di laboratorio e che siano avvezze alle comuni pratiche di laboratorio. Indossare abbigliamento idoneo come camici, guanti ed occhiali. Attenzione ad evitare contatto con la pelle e gli occhi. Nel caso di contatto con pelle o occhi, immediatamente lavare con acqua. Consultare la scheda di sicurezza del prodotto per specifici consigli.
- I reagenti sono per uso in vitro diagnostico e non sono per uso terapeutico.
- Non mischiare tra loro reagenti di diversi lotti o provenienza.
- Non usare i kit dopo la data di scadenza.
- Non esporre i reagenti del kit, durante la conservazione e l'incubazione a forti fonti di luce.
- Non pipettare utilizzando la bocca.
- Non mangiare o fumare nell'area dove sono utilizzati i reagenti dei kit o i campioni.
- Evitare il contatto dei reagenti o campioni con la pelle o le mucose.
- Guanti di gomma o lattice dovrebbero essere sempre indossati quando si usano reagenti e campioni.
- Evitare il contatto tra il substrato del kit e agenti ossidanti e metallo.
- Evitare schizzi o fumi.
- Per evitare contaminazione microbica o cross-contaminazione dei reagenti o dei campioni che invaliderebbero il test, usare sempre pipette e puntali mono-uso.
- Usare vaschette pulite e dedicate per la dispensare il reagente substrato.

- Acqua distillata o de-ionizzata deve essere utilizzata per la preparazione dei reagenti.
- La soluzione di substrato deve essere portata a temperatura ambiente prima dell'utilizzo.
- Decontaminare ed eliminare i campioni e tutto il materiale potenzialmente contaminante perchè potrebbero contenere agenti infettanti. Il metodo preferito per la decontaminazione è l'autoclavaggio per minimo 1 ora a 121,5°C.
- Gli scarti liquidi, non contenenti acido a gli scarti neutralizzati possono essere mischiati con sodio ipoclorido in un volume finale di 1,0%. Lasciare minimo 30 minuti per l'effettiva decontaminazione. Scarti liquidi contenenti acido devono essere neutralizzati prima dell'aggiunta di sodio ipoclorido.

4 Preparazione Dei Reagenti

Prima di cominciare con le procedure del test i il concentrato dei tampone devono essere portati a temperatura ambientale e diluiti a concentrazioni adeguati. Se il concentrato dei tampone presenta cristalli in sospensione, riscaldare lievemente il tampone fino a ottenere la completa dissoluzione dei cristalli.

4.1 Tampone di Lavaggio (1x)

Versare l'intero contenuto (25 ml) del tampone di lavaggio concentrato (20x) in un cilindro graduato pulito da 500 ml. Portare il volume finale a 500 ml utilizzando acqua distillata o acqua deionizzata. Mescolare delicatamente per evitare la formazione di schiuma.

Trasferire il prodotto in una bottiglia pulita e conservare a temperature comprese fra 2°C e 25°C. Il tampone di lavaggio (1x) è stabile per 30 giorni.

5 Procedura del Test

- Usare la piastra immediatamente dopo la rimozione dall'ambiente refrigerato a -20°C !
 - Non attendere la completa dissoluzione dei pellet prima di usare i campioni; la reazione di legame nelle strip degli étalon inizia immediatamente dopo l'aggiunta di acqua!
 - Non cercare di dissolvere i pellet pipettando su e giù nei pozzetti; particelle del pellet possono aderire al puntale determinando una notevole variabilità dei risultati.
 - Eseguire la fase di lavaggio con almeno 400 μl di tampone di lavaggio come indicato nel manuale o riempire completamente i pozzetti; in caso contrario non sarà possibile rimuovere tutti i residui del pellet adesi al bordo del pozzetto, determinando una notevole variabilità dei risultati.
 - Il tampone di lavaggio deve coprire bene i fondi dei pozzetti e deve essere lasciata per qualche secondo, prima di essere aspirata.
 - Rimuovere con cautela i fogli protettivi delle strip degli étalon per lasciare tutti i pellet liofilizzati nei pozzetti.
- a. Diluire i campioni di siero o plasma con diluente campione 1:100 seguendo uno degli schemi di diluizione qui indicati:
- I. 5 μl campione + 495 μl diluente campione oppure
 - II. 10 μl campione + 90 μl diluente campione, prendere 50 μl di questo campione diluito 1:10 e aggiungere 450 μl di diluente campione.
- b. Stabilire il numero di strip dei micropozzetti necessarie per analizzare la quantità desiderata di campioni più le **strip** per i blank e gli étalon (**colorate**). Tutti i campioni, gli étalon, il blank e i campioni di controllo opzionali devono essere processati in duplicato. Rimuovere dal supporto le **strip micropozzetti** non utilizzate e conservarle nella bustina metallica contenente la polvere essiccante, mantenendole a -20°C e perfettamente sigillate. Mettere le strip contenenti la curva étalon nelle posizioni da A1/A2 a H1/H2 (vedere la Table 7).
- c. Dispensare **acqua distillata** a tutti i **pozzetti per lo standard ed il bianco** come indicato sull'etichetta degli standard strip (A1, A2 fino a H1, H2)

d. Dispensare 100 µl di **acqua distillata** nei **pozzetti dei campioni**.

Table 7

Tabella rappresenta un esempio dell'organizzazione dei bianchi, standardi e campioni nelle strip della piastra

	1	2	3	4
A	Standard 1 (25.00 ng/ml)	Standard 1 (25.00 ng/ml)	Campione 1	Campione 1
B	Standard 2 (12.50 ng/ml)	Standard 2 (12.50 ng/ml)	Campione 2	Campione 2
C	Standard 3 (6.25 ng/ml)	Standard 3 (6.25 ng/ml)	Campione 3	Campione 3
D	Standard 4 (3.13 ng/ml)	Standard 4 (3.13 ng/ml)	Campione 4	Campione 4
E	Standard 5 (1.56 ng/ml)	Standard 5 (1.56 ng/ml)	Campione 5	Campione 5
F	Standard 6 (0.78 ng/ml)	Standard 6 (0.78 ng/ml)	Campione 6	Campione 6
G	Standard 7 (0.39 ng/ml)	Standard 7 (0.39 ng/ml)	Campione 7	Campione 7
H	Blind Campione	Blind Campione	Campione 8	Campione 8

- e. Dispensare 50 µl di ciascun **campione** diluito 1:100, in duplicato, nei pozzetti di reazione e mescolare il contenuto.
- f. Coprire con un **copripiastra** e incubare a temperatura ambiente (18-25°C) per 2 ore utilizzando, se disponibile, un vortex a 400 rpm.
- g. Rimuovere il **copripiastra** e svuotare i pozzetti. Lavare 3 volte le strip micropozzetti utilizzando circa 400 µl di tampone di lavaggio per pozzetto, aspirando accuratamente il contenuto dei micropozzetti tra un lavaggio e l'altro. Evitare di scalfire la superficie dei micropozzetti.

- h. Dopo l'ultimo lavaggio, asciugare le strip micropozzetti con un tampone o carta assorbente per rimuovere il tampone di lavaggio in eccesso. Utilizzare le strip subito dopo il lavaggio o sistemarle capovolte su carta assorbente umida per non più di 15 min. Non lasciar asciugare i pozzetti.
- i. Pipettare 100 µl di **soluzione substrato TMB** in tutti i pozzetti, inclusi quelli del blank.
- j. Incubare le strip a temperatura ambiente (18-25° C) per circa 10 minuti. Evitare l'esposizione diretta a luci intense. **È necessario monitorare i valori O.D. a livello della piastra e interrompere la reazione del substrato prima che i pozzetti positivi cessino di essere appropriatamente registrabili.**
Si raccomanda di aggiungere la soluzione di stop quando lo standard più elevato ha sviluppato un colore blu scuro.
Alternativamente lo sviluppo del colore può essere monitorato con un lettore ELISA a 620 nm. La reazione del substrato deve essere bloccata non appena viene misurato un valore delle OD di 0.9 - 0.95.
- k. Interrompere la reazione enzimatica pipettando rapidamente 100 µl di **soluzione bloccante** in ciascun pozzetto, inclusi i pozzetti del blank. È importante che la soluzione bloccante si diffonda rapidamente e uniformemente attraverso i micropozzetti per inattivare completamente l'enzima. I risultati devono essere letti immediatamente dopo l'aggiunta della soluzione bloccante o entro 1 ora se le strip sono conservate in un luogo buio a 2-8° C.
- l. Leggere l'assorbanza di ciascun micropozzetto su uno spettrofotometro che utilizza 450 nm come lunghezza d'onda primaria (620 nm come lunghezza d'onda di riferimento alternativa; valori da 610 nm a 650 nm sono accettabili). Azzerare il lettore della piastra secondo le istruzioni del produttore e utilizzando i pozzetti del blank. Determinare l'assorbanza sia dei campioni, sia degli étalon di human sL-selectin.

I campioni sono stati diluiti 1:200, quindi la concentrazione dalla curva standard risultante deve essere moltiplicata per il fattore di diluizione (x200).